



2012年1月16日

新機能「スペクトルiQ」を全器種に搭載

デジタル補聴器^{エックス}「Xシリーズ」「イグナイト」を新発売

スターキージャパン株式会社(本社:神奈川県横浜市 代表取締役:高木 日出夫)は、新機能「スペクトルiQ」を搭載した新しい耳あな型/耳かけ型補聴器、「Xシリーズ」「イグナイト」を2012年1月16日より発売いたします。

今回発売するデジタル補聴器、「Xシリーズ」「イグナイト」は、以下のような特長を備えています。

- * 新機能「スペクトルiQ」を全器種に搭載。
- * 「Xシリーズ」には、定評の騒音抑制機能「ボイスiQ」をバージョンアップした「ボイスiQ2」を搭載。
- * 「イグナイト」は、「スペクトルiQ」を搭載しつつ、お求めやすい価格に設定。
- * 圧縮時定数の高速化(当社従来品比 最大約100倍)で、さらなる高音質を追求。


さらに、耳かけ型の新しい製品スタイルとして「BTE13 パワープラス」「RIC13」「ジーノ(RIC10)」を「Xシリーズ」「イグナイト」の全器種で展開。従来の耳あな型/耳かけ型各スタイルと合わせ、スターキーの補聴器ラインナップがさらに充実いたします。

※「Xシリーズ」「イグナイト」の製品イメージ



※主な特長のご紹介

<新機能「スペクトル iQ」>

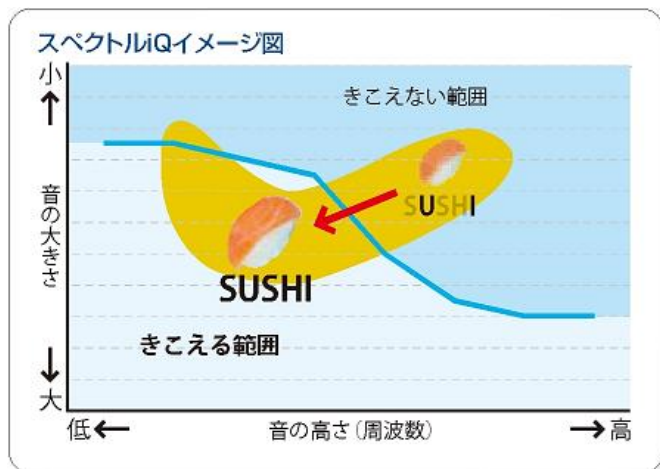

言葉を理解するには「サ行」に代表される周波数の高い子音が重要ですが、難聴のタイプによっては音を大きくしても効果が薄い場合があります。これに対して周波数の加工を行う方法がいくつか考案されていますが、いずれも設定した周波数の範囲にある音を全て加工してしまうため、補聴器から出る音に不自然さが生じるのが難点でした。

「スペクトル iQ」は、設定した周波数の範囲にある言葉だけを取り出して聞き取れる範囲に複製するため、自然なきこえはそのまま、言葉の理解に貢献できます。

<ボイス iQ2>

騒音と言葉を超高速で分析し、言葉の間にある騒音だけを抑制する「ボイス iQ」を、“2”に発展させたものです。最上級器種「X シリーズ 110」では、最大抑制レベルを 20dB まで強化。その他の器種においてもアルゴリズムを見直し、より効果的に動作するよう改良されています。

<その他の特長>

・ハイドラシールド2

スターキー定評の「アドバンスド ハイドラシールド」の改良版です。ナノコーティングの改良によって撥水性の他、撥油性もプラスされました。(耳かけ型のみ)

・セルフラーニング

お客様が調整したボリュームを学習し、少しずつ自動的に適用します。

・サウンドポイント

お客様ご自身が補聴器の微調整に参加できるフィッティングツールです。

・スワップフィット

補聴器を異なる器種に買い換えた場合などにも、従来の調整データを移行できる機能です。(対象器種限定)

・ピュアウェーブ フィードバック エリミネータ

定評あるスターキーのハウリング防止機能 ピュアウェーブ フィードバック エリミネータにより、補聴器装用で起こる不快なピーピー音を除去し、快適なきこえをお届けします。(イグナイト20はフィードバック キャンセラー)

※新しい製品スタイルのご紹介

<BTE13パワープラス>



従来は PR44 (675) 電池でなければ出せなかった、利得 84dB (JIS) のハイパワーを PR48 (13) 電池仕様で、本体サイズもそのままに実現しました。ハイドラシールド2とタッチパネルで耐久性、操作性にも優れ、スペクトル iQ や豊富な本体カラー (全 12 色) とのコンビネーションで、幅広い層の高度～重度難聴に対応します。

<RIC13>



軽度～重度まで幅広く対応できるオールマイティな RIC タイプ補聴器に、PR48 (13) 電池仕様が登場します。本体サイズを PR41 (312) 電池仕様並みに抑えており、小さくて見えにくい RIC タイプのメリットはそのままです。さらにはオーディオチューン (オプション) 追加による FM 対応も可能にしました。

<ジーノ Xino>



PR536 (10) 電池仕様の RIC タイプです。本体を可能な限り小型化しつつテレコイルを内蔵したほか、ボリューム／メモリーコントロールも、スターキー独自のタッチパネル方式だから実現できました。また、耳の後にすっぽり隠れてしまう程のサイズにあえて全 12 色のカラーをご用意し、「見えないところの御洒落」感覚でお使いいただけます。

希望小売価格 (非課税)

器種	片耳価格 (耳かけ型)	両耳価格 (耳かけ型)	片耳価格 (耳あな型)	両耳価格 (耳あな型)
X シリーズ 110	380,000 円～	646,000 円～	400,000 円～	680,000 円～
X シリーズ 90	300,000 円～	510,000 円～	320,000 円～	544,000 円～
X シリーズ 70	220,000 円～	374,000 円～	240,000 円～	408,000 円～
イグナイト 30	160,000 円～	272,000 円～	180,000 円～	306,000 円～
イグナイト 20	120,000 円～	—	140,000 円～	—

※価格は製品の仕様によって異なります。