

スターキー補聴器

Xシリーズカタログ



補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。
しかし、着用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

スターキージャパン株式会社



0120-045-190

フリーダイヤル

〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台5-2-20

Tel.045-942-7226 Fax.045-942-7158

<http://www.starkey-japan.co.jp>

第2種医療機器製造販売許可番号:14B2X00027 許可番号:14BZ000426



FM90185/ISO9001
MD84856/ISO13485

[X] series™

スターキー補聴器のご相談・ご用命は当店へ



6月6日は補聴器の日




◎製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。
◎本カタログに掲載されている補聴器本体は非課税です。
◎本カタログに掲載されている製品の色は印刷により、実際と異なる場合があります。

言葉と自然なきこえにこだわるスターキーが また一步、補聴器を進化させました。

特長1 **NEW** スペクトルiQ (全機種標準搭載)

言葉を理解するには「サ行」に代表される周波数の高い子音が重要ですが、難聴のタイプによっては音を大きくしても効果が薄い場合があります。これに対して周波数の加工を行う方法がいくつか考案されていますが、いずれも設定した周波数の範囲にある音を全て加工してしまうため、補聴器から出る音に不自然さが生じるのが難点でした。

「スペクトルiQ」は、設定した周波数の範囲にある言葉だけを取り出して聞こえる範囲にコピーするため、自然なきこえはそのままで、言葉の理解に貢献できます。

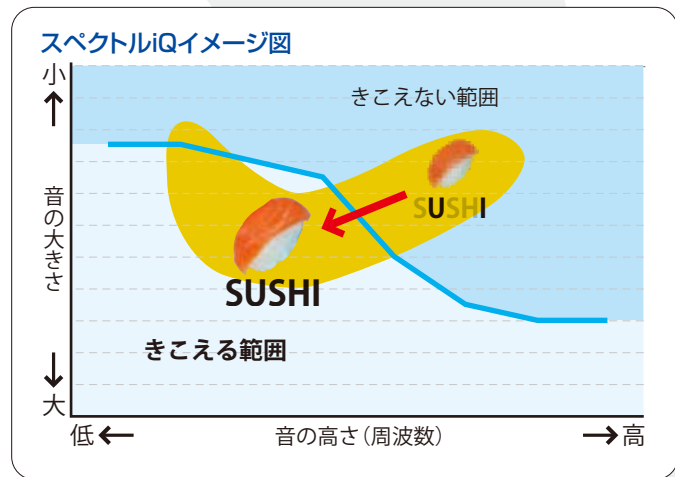

特長2 さらに進化! ボイスiQ2

騒音と言葉を超高速で分析し、言葉の間にある騒音だけを抑制する「ボイスiQ」が、「2」にバージョンアップ。基本性能の進化と相まって、よりアクティブな補聴器ライフのお手伝いをします。(イグナイトを除く)

特長3 さらに進化! ハイドラシールド2

スターキー定評の「アドバンスド ハイドラシールド」が、さらに進化しました。ナノコーティングの改良によって撥水性の他、撥油性もプラスされました。(耳かけ型のみ)

特長4 **定評!** ピーピーしない補聴器®

ピュアウェーブ フィードバック エリミネータ

定評あるスターキーのハウリング防止機能ピュアウェーブ フィードバック エリミネータにより、補聴器装着で起こる不快な「ピーピー」という音を除去し、快適なきこえをお届けします。

(イグナイト20はフィードバック キャンセラー)

便利な機能 (各機能の有無は、製品により異なります。)

■セルフラーニング

お客様が調整したボリュームを学習し、少しずつ自動的に適用します。

■ライブREM

補聴器が耳の形や大きさの個人差を測定し、調整に反映します。

■オーディオスケープ

様々な環境音を補聴器が解析、識別、分類し、自動的に騒音を抑えます。

■インビジョン指向性

聴取環境を補聴器が認識し、自動的に指向性・無指向性を切換えます。

■オートマッチホン

受話器を補聴器に近づけると電話メモリーへ自動切換えします。

■オートコイル

電話の声だけを直接補聴器に伝えるテレコイルに自動切換えします。

■T2リモート*1

携帯電話やプッシュホンに補聴器のリモコンとして使えます。

■T2オンデマンド*2

自宅にいながら補聴器の簡単な調整が受けられます。

■マルチメモリー

お客様のライフスタイルに対応したメモリーを選択できます。(最大4メモリー)

■ボイスお知らせ音

電池交換時期などを音声でお知らせします。

■自己診断機能

補聴器のマイク、回路などのチェックが行えます。

■FM対応

オーディオチューン(オプション)を取り付けると、FMシステムに対応可能です。(RIC13及びBTE13各種)

■ライブスピーチマッピング

音声入力に対し、補聴器が行う処理をリアルタイムで表示する、効果的なカウンセリングツールです。

■データログ

補聴器の使用状況を記録し、調整に役立てます。

■サウンドポイント

お客様ご自身が補聴器の微調整に参加できるフィッティングツールです。

*1: お使いの電話の機種によってはご利用にならない場合があります。

*2: お使いの電話回線の状況によってはご利用にならない場合があります。

12色の多彩なカラーバリエーション




シャンパン★ ブロンズ★ スターリング★ スレート★ オニキス★ パール
パープルポップ マリンブルー パールブルー パールピンク キャンディーピンク ホットレッド


RIC13/312/BTE312は6色(シャンパン、ブロンズ、スターリング、スレート、オニキス、パール)
★印以外のカラーは、取り寄せのため納品にお時間を頂く場合がございます。

適応聴力範囲


●耳あな型

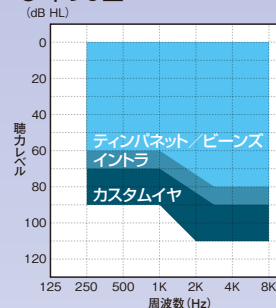


●ジーン

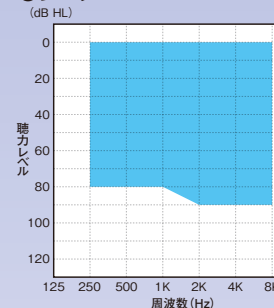


●耳あな型アブソリュートパワー

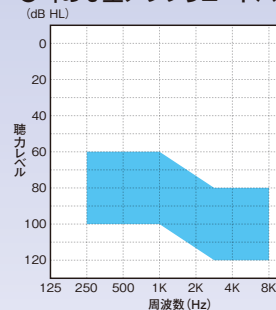


●RIC13/RIC312

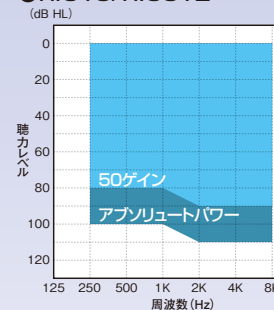

●スケルトン

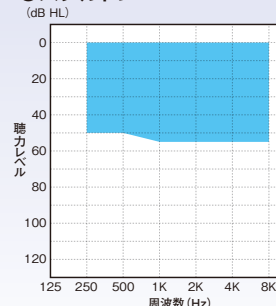

●BTE13/BTE312

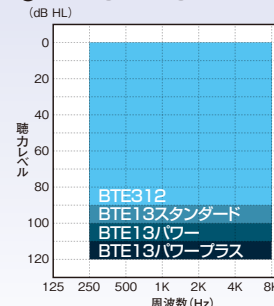

BTE13パワープラス



- 使用電池：
PR48(13)
- タッチパネル
- FM対応
(オプション)

サイズはミドル級、パワーはヘビー級。

従来はPR44(675)電池でなければ出せなかったハイパワーをPR48(13)電池仕様で、本体サイズもそのままに実現しました。ハイドラシールド2とタッチパネルで耐久性、操作性にも優れ、スペクトルIQや豊富な本体カラーとのコンビネーションで、幅広い層の高度～重度難聴に対応します。

X series 110

16チャンネル16バンド
片耳価格 400,000円 両耳価格 680,000円

X series 90

12チャンネル12バンド
片耳価格 320,000円 両耳価格 544,000円

X series 70

8チャンネル8バンド
片耳価格 240,000円 両耳価格 408,000円

ignite 30

6チャンネル6バンド
片耳価格 180,000円 両耳価格 306,000円

ignite 20

4チャンネル4バンド
片耳価格 140,000円

RIC 13



- 使用電池：
PR48(13)
- タッチパネル
- FM対応
(オプション)

13電池が、RICの可能性を広げます。

軽度～重度まで幅広く対応できるオールマイティなRICタイプ補聴器に、PR48(13)電池仕様が仲間入り。本体サイズをPR41(312)電池仕様並みに抑えたことで、小さくて見えにくいRICタイプのメリットもそのまま。さらにはオーディオシュー(オプション)追加によるFM対応も可能です。

X series 110

16チャンネル16バンド
片耳価格 380,000円 両耳価格 646,000円

16チャンネル16バンド アブソリュートパワー
片耳価格 400,000円 両耳価格 680,000円

X series 90

12チャンネル12バンド
片耳価格 300,000円 両耳価格 510,000円

12チャンネル12バンド アブソリュートパワー
片耳価格 320,000円 両耳価格 544,000円

X series 70

8チャンネル8バンド
片耳価格 220,000円 両耳価格 374,000円

8チャンネル8バンド アブソリュートパワー
片耳価格 240,000円 両耳価格 408,000円

ignite 30

6チャンネル6バンド
片耳価格 160,000円 両耳価格 272,000円

6チャンネル6バンド アブソリュートパワー
片耳価格 180,000円 両耳価格 306,000円

ignite 20

4チャンネル4バンド
片耳価格 120,000円

XiNO (ジーノ)



- 使用電池：
PR536(10)
- タッチパネル

超小型で12色。才色兼備の“隠れた”実力派。

PR536(10)電池仕様のRICタイプが登場しました。本体を可能な限り小型化しつつテレコイルを内蔵したほか、ボリューム/メモリーコントロールも、スターキー独自のタッチパネル方式だから実現できました。また、耳の後ろにすっぽり隠れてしまう程のサイズに、あえて12色をご用意。ジーノなら、補聴器も「見えないところの御洒落」感覚です。

X series 110

16チャンネル16バンド
片耳価格 380,000円 両耳価格 646,000円

X series 90

12チャンネル12バンド
片耳価格 300,000円 両耳価格 510,000円

X series 70

8チャンネル8バンド
片耳価格 220,000円 両耳価格 374,000円

ignite 30

6チャンネル6バンド
片耳価格 160,000円 両耳価格 272,000円

ignite 20

4チャンネル4バンド
片耳価格 120,000円

■各器種の機能詳細は、8ページから16ページをご覧ください。

- 保証(補聴器本体):
- Xシリーズ110=4年間保証
- Xシリーズ90/70=3年間保証
- イグナイト30=2年間保証
- イグナイト20=1年間保証
- ※その他の保証は17ページをご覧ください。

■医療機器認証番号
Xシリーズ耳かけ型: 223ADBZX00106000

X series™ 110

機能

- 16チャンネル16バンド
- スペクトルiQ
- ビュアウェブフィードバック エリミネータ
- セルフラーニング
- ライブREM
-
- マルチメモリー
- ライブスピーチマッピング(3D/2D)
- ボイスお知らせ音
- データログ
- 自己診断機能
- サウンドポイント

よりよい音質を追求するあなたに バイブラント(Vibrant)モデル

- プレミアム音響シーンアナライザー
 - ・ボイスiQ2 最大抑制レベル:20dB (5段階調整)
 - ・オーディオスケープ 最大抑制レベル:20dB (5段階調整)
 - インビジョン指向性※1
 - ・オートマッチックホン
 - ・オートコイル※2
 - ・T2リモート(耳あな型のみ)
 - ・T2オンデマンド
- ※1: 耳あな型はオプション(カスタマイヤ、イントラのみ)
 ※2: 耳あな型はオプション(カスタマイヤのみ)



ボイスiQ2



静寂



風



機械騒音



ビーンズ(Deep CIC)

片耳価格 420,000円
 両耳価格 714,000円

●使用電池:
PR536(10A)

※ライブREMとオートマッチックホンは非対応です。



ティンパネット(CIC)

片耳価格 400,000円
 両耳価格 680,000円

●使用電池:
PR536(10A)



イントラ(ITC)

片耳価格 400,000円
 両耳価格 680,000円

●使用電池:
PR41(312)
●ボリューム搭載

イントラ(ITC) アブソリュートパワー(注)

片耳価格 420,000円
 両耳価格 714,000円

●使用電池:
PR41(312)
●ボリューム搭載



イントラ(ITC) 指向性付き

片耳価格 420,000円
 両耳価格 714,000円

●使用電池:
PR41(312)
●ボリューム搭載



カスタマイヤ(ITE)

片耳価格 400,000円
 両耳価格 680,000円

●使用電池:
PR48(13)
●ボリューム搭載

カスタマイヤ(ITE) アブソリュートパワー

片耳価格 420,000円
 両耳価格 714,000円

●使用電池:
PR48(13)
●ボリューム搭載



カスタマイヤ(ITE) 指向性付き

片耳価格 420,000円
 両耳価格 714,000円

●使用電池:
PR48(13)
●ボリューム搭載

(注)外耳道の大きさによっては作成できない場合があります。

カスタマイズ(耳あな型のみ。17ページもご覧ください。)

- 標準はデジタルボリュームとなります。(カスタマイヤ、イントラ、スケルトン312)アナログボリューム、プッシュボタン、ボリューム無しはいずれかに変更できます。
 - 電池サイズは、イントラはPR536へ、カスタマイヤはPR41へそれぞれ変更することができます。
- ※ビーンズは製作に2週間程度要しますので、ご注文の際は販売店にお問い合わせ下さい。



RIC312 (50ゲイン)

片耳価格 380,000円
 両耳価格 646,000円

●使用電池:
PR41(312)



RIC312 アブソリュートパワー

片耳価格 400,000円
 両耳価格 680,000円

●使用電池:
PR41(312)
●イヤーマールド付



BTE13スタンダード

片耳価格 380,000円
 両耳価格 646,000円

●使用電池:
PR48(13)
●タッチパネル
●FM対応
(オプション)



BTE13パワー

片耳価格 380,000円
 両耳価格 646,000円

●使用電池:
PR48(13)
●タッチパネル
●FM対応
(オプション)



BTE312

片耳価格 380,000円
 両耳価格 646,000円

●使用電池:
PR41(312)
●タッチパネル



スケルトン(312タイプ)

片耳価格 425,000円
 両耳価格 722,500円

●使用電池:
PR41(312)
●ボリューム搭載



スケルトン(10Aタイプ)

片耳価格 425,000円
 両耳価格 722,500円

●使用電池:
PR536(10A)

4年間
保証

補聴器本体:お買い上げ日より4年間の自然故障は無償修理、その後1年間の修理に關しましては、一律の修理料金にて保証いたします。
 レシーバー(RIC):お買い上げ日より2年間の自然故障は無償修理いたします。
 ※その他の保証は17ページをご覧ください。

■医療機器認証番号

Xシリーズ耳あな型: 223ADBZX00107000
 Xシリーズ耳かけ型: 223ADBZX00106000

X series™ 90

機能

- 12チャンネル12バンド
- スペクトルiQ
- ビューウェブフィードバック エリミネータ
- セルフラーニング
- ライブREM
- マルチメモリー
- ボイスお知らせ音
- ライブスピーチマッピング(2D)
- データログ
- 自己診断機能
- サウンドポイント

行動派のあなたのための アクティブ(Active)モデル

- アドバンスド音響シーンアナライザー
 - ・ボイスiQ2 最大抑制レベル: 8dB (3段階調整)
 - ・オーディオスケープ 最大抑制レベル: 10dB (3段階調整)
 - インビジョン指向性※1
 - ・オートマチックホン
 - ・オートコイル※2
 - ・T2リモート(耳あな型のみ)
 - ・T2オンデマンド
- ※1: 耳あな型はオプション(カスタマイヤ、イントラのみ)
 ※2: 耳あな型はオプション(カスタマイヤのみ)



ボイスiQ2



静寂



風



機械騒音



ビーンズ(Deep CIC)

片耳価格 340,000円
 両耳価格 578,000円

- 使用電池: PR536(10A)

※ライブREMとオートマチックホンは非対応です。



ティンパネット(CIC)

片耳価格 320,000円
 両耳価格 544,000円

- 使用電池: PR536(10A)



イントラ(ITC)

片耳価格 320,000円
 両耳価格 544,000円

- 使用電池: PR41(312)
- ボリューム搭載

イントラ(ITC) アブソリュートパワー(注)

片耳価格 340,000円
 両耳価格 578,000円

- 使用電池: PR41(312)
- ボリューム搭載



イントラ(ITC) 指向性付き

片耳価格 340,000円
 両耳価格 578,000円

- 使用電池: PR41(312)
- ボリューム搭載



カスタマイヤ(ITE)

片耳価格 320,000円
 両耳価格 544,000円

- 使用電池: PR48(13)
- ボリューム搭載

カスタマイヤ(ITE) アブソリュートパワー

片耳価格 340,000円
 両耳価格 578,000円

- 使用電池: PR48(13)
- ボリューム搭載



カスタマイヤ(ITE) 指向性付き

片耳価格 340,000円
 両耳価格 578,000円

- 使用電池: PR48(13)
- ボリューム搭載

(注)外耳道の大きさによっては作成できない場合があります。

カスタマイズ(耳あな型のみ。17ページもご覧ください。)

- 標準はデジタルボリュームとなります。(カスタマイヤ、イントラ、スケルトン312)アナログボリューム、プッシュボタン、ボリューム無しいずれかに変更できます。
 - 電池サイズは、イントラはPR536へ、カスタマイヤはPR41へそれぞれ変更することができます。
- ※ビーンズは製作に2週間程度要しますので、ご注文の際は販売店にお問い合わせ下さい。



RIC312 (50ゲイン)

片耳価格 300,000円
 両耳価格 510,000円

- 使用電池: PR41(312)



RIC312 アブソリュートパワー

片耳価格 320,000円
 両耳価格 544,000円

- 使用電池: PR41(312)
- イヤーマールド付



BTE13スタンダード

片耳価格 300,000円
 両耳価格 510,000円

- 使用電池: PR48(13)
- タッチパネル
- FM対応(オプション)



BTE13パワー

片耳価格 300,000円
 両耳価格 510,000円

- 使用電池: PR48(13)
- タッチパネル
- FM対応(オプション)



BTE312

片耳価格 300,000円
 両耳価格 510,000円

- 使用電池: PR41(312)
- タッチパネル



スケルトン(312タイプ)

片耳価格 345,000円
 両耳価格 586,500円

- 使用電池: PR41(312)
- ボリューム搭載



スケルトン(10Aタイプ)

片耳価格 345,000円
 両耳価格 586,500円

- 使用電池: PR536(10A)

3年間保証

補聴器本体:お買い上げ日より3年間の自然故障は無償修理、その後2年間の修理に關しましては、一律の修理料金にて保証いたします。
 レシーバー(RIC):お買い上げ日より2年間の自然故障は無償修理いたします。
 ※その他の保証は17ページをご覧ください。

医療機器認証番号

Xシリーズ耳あな型: 223ADBZX00107000
 Xシリーズ耳かけ型: 223ADBZX00106000

X series™ 70

機能

- 8チャンネル8バンド
- スペクトルiQ
- ビューウェーブ フィードバック エリミネータ
- セルフラーニング
- ライブREM
- マルチメモリー
- ボイスお知らせ音
- ライブスピーチマッピング(2D)
- データログ
- 自己診断機能
- サウンドポイント

もっと会話を楽しみたいあなたに ソーシャル(Social)モデル

- セレクト音響シーンアナライザー
 - ・ボイスiQ2 最大抑制レベル: 6dB (2段階調整: オン/オフ)
 - ・オーディオスケープ 最大抑制レベル: 2段階調整 (オン/オフ)
 - インビジョン指向性※1
 - ・オートマッチックホン
 - ・オートコイル※2
 - ・T2リモート(耳あな型のみ)
 - ・T2オンデマンド
- ※1: 耳あな型はオプション(カスタマイヤ、イントラのみ)
 ※2: 耳あな型はオプション(カスタマイヤのみ)



ボイスiQ2



静寂



風



機械騒音



ビーンズ(Deep CIC)

片耳価格 260,000円
 両耳価格 442,000円

●使用電池:
PR536(10A)

※ライブREMとオートマッチックホンは非対応です。



ティンパネット(CIC)

片耳価格 240,000円
 両耳価格 408,000円

●使用電池:
PR536(10A)



イントラ(ITC)

片耳価格 240,000円
 両耳価格 408,000円

●使用電池:
PR41(312)
●ボリューム搭載

イントラ(ITC) アブソリュートパワー(注)

片耳価格 260,000円
 両耳価格 442,000円

●使用電池:
PR41(312)
●ボリューム搭載



イントラ(ITC) 指向性付き

片耳価格 260,000円
 両耳価格 442,000円

●使用電池:
PR41(312)
●ボリューム搭載



カスタマイヤ(ITE)

片耳価格 240,000円
 両耳価格 408,000円

●使用電池:
PR48(13)
●ボリューム搭載

カスタマイヤ(ITE) アブソリュートパワー

片耳価格 260,000円
 両耳価格 442,000円

●使用電池:
PR48(13)
●ボリューム搭載



カスタマイヤ(ITE) 指向性付き

片耳価格 260,000円
 両耳価格 442,000円

●使用電池:
PR48(13)
●ボリューム搭載

(注)外耳道の大きさによっては作成できない場合があります。

カスタマイズ(耳あな型のみ。17ページもご覧ください。)

- 標準はデジタルボリュームとなります。(カスタマイヤ、イントラ、スケルトン312)アナログボリューム、プッシュボタン、ボリューム無しのいずれかに変更できます。
 - 電池サイズは、イントラはPR536へ、カスタマイヤはPR41へそれぞれ変更することができます。
- ※ビーンズは製作に2週間程度要しますので、ご注文の際は販売店にお問い合わせ下さい。



RIC312 (50ゲイン)

片耳価格 220,000円
 両耳価格 374,000円

●使用電池:
PR41(312)



RIC312 アブソリュートパワー

片耳価格 240,000円
 両耳価格 408,000円

●使用電池:
PR41(312)
●イヤーマールド付



BTE13スタンダード

片耳価格 220,000円
 両耳価格 374,000円

●使用電池:
PR48(13)
●タッチパネル
●FM対応
(オプション)



BTE13パワー

片耳価格 220,000円
 両耳価格 374,000円

●使用電池:
PR48(13)
●タッチパネル
●FM対応
(オプション)



BTE312

片耳価格 220,000円
 両耳価格 374,000円

●使用電池:
PR41(312)
●タッチパネル



スケルトン(312タイプ)

片耳価格 265,000円
 両耳価格 450,500円

●使用電池:
PR41(312)
●ボリューム搭載



スケルトン(10Aタイプ)

片耳価格 265,000円
 両耳価格 450,500円

●使用電池:
PR536(10A)

3年間
保証

補聴器本体:お買い上げ日より3年間の自然故障は無償修理、その後2年間の修理に關しましては、一律の修理料金にて保証いたします。
 レシーバー(RIC):お買い上げ日より2年間の自然故障は無償修理いたします。
 ※その他の保証は17ページをご覧ください。

医療機器認証番号

Xシリーズ耳あな型: 223ADBZX00107000
 Xシリーズ耳かけ型: 223ADBZX00106000

ignite[™]30

静かな日常に確かなきこえを
お求めのあなたにカーム(Calm) モデル

機能

- 6チャンネル6バンド
- スペクトルiQ
- ヒュアウェブ フィードバック エリミネータ
- ライブREM
- ライブスピーチマッピング(2D)
- マルチメモリー
- データログ
- ボイスお知らせ音

- スタンダード音響シーンアナライザー
- インビジョン指向性※1
- ・オーディオスケープ
- ・オートマチックホン
- 最大抑制レベル:2段階調整(オン/オフ)
- ・オートコイル※2
- ・T2リモート(耳あな型のみ)
- ・T2オンデマンド



静寂

風

騒音

- ※1: 耳あな型はオプション
(カスタマイヤ、イントラのみ)
- ※2: 耳あな型はオプション
(カスタマイヤのみ)



ティンパネット(CIC)

片耳価格 180,000円
両耳価格 306,000円

- 使用電池:
PR536(10A)



イントラ(ITC)

片耳価格 180,000円
両耳価格 306,000円

- 使用電池:
PR41(312)
- ボリューム搭載

イントラ(ITC) アブソリュートパワー(注)

片耳価格 200,000円
両耳価格 340,000円

- 使用電池:
PR41(312)
- ボリューム搭載



イントラ(ITC) 指向性付き

片耳価格 200,000円
両耳価格 340,000円

- 使用電池:
PR41(312)
- ボリューム搭載

カスタマイヤ(ITE)

片耳価格 180,000円
両耳価格 306,000円

- 使用電池:
PR48(13)
- ボリューム搭載



カスタマイヤ(ITE) アブソリュートパワー

片耳価格 200,000円
両耳価格 340,000円

- 使用電池:
PR48(13)
- ボリューム搭載



カスタマイヤ(ITE) 指向性付き

片耳価格 200,000円
両耳価格 340,000円

- 使用電池:
PR48(13)
- ボリューム搭載

(注)外耳道の大きさによっては作成できない場合があります。



RIC312 (50ゲイン)

片耳価格 160,000円
両耳価格 272,000円

- 使用電池:
PR41(312)



RIC312 アブソリュートパワー

片耳価格 180,000円
両耳価格 306,000円

- 使用電池:
PR41(312)
- イヤーマールド付



BTE13スタンダード

片耳価格 160,000円
両耳価格 272,000円

- 使用電池:
PR48(13)
- タッチパネル
- FM対応
(オプション)



BTE13パワー

片耳価格 160,000円
両耳価格 272,000円

- 使用電池:
PR48(13)
- タッチパネル
- FM対応
(オプション)



BTE312

片耳価格 160,000円
両耳価格 272,000円

- 使用電池:
PR41(312)
- タッチパネル



スケルトン(312タイプ)

片耳価格 205,000円
両耳価格 348,500円

- 使用電池:
PR41(312)
- ボリューム搭載



スケルトン(10Aタイプ)

片耳価格 205,000円
両耳価格 348,500円

- 使用電池:
PR536(10A)

カスタマイズ(耳あな型のみ。17ページもご覧ください。)

- 標準はデジタルボリュームとなります。(カスタマイヤ、イントラ、スケルトン312)
- アナログボリューム、フッシュボタン、ボリューム無しのいずれかに変更できます。
- 電池サイズは、イントラはPR536へ、カスタマイヤはPR41へそれぞれ変更することができます。

2年間保証

補聴器本体:お買い上げ日より2年間の自然故障は無償修理、その後3年間の修理
に関しましては、一律の修理料金にて保証いたします。
レシーバー(RIC):お買い上げ日より2年間の自然故障は無償修理いたします。
※その他の保証は17ページをご覧ください。

■医療機器認証番号

Xシリーズ耳あな型: 223ADBZX00107000

Xシリーズ耳かけ型: 223ADBZX00106000

ignite[™]20

機能

- 4チャンネル4バンド
 - スペクトルiQ
 - フィードバック キャンセラー
 - マルチメモリー
 - ボイスお知らせ音
 - データログ
- ※1: 耳あな型はオプション (カスタマイヤのみ)
- スタンダード音響シーンアナライザー
 - オーディオスケープ
 - 最大抑制レベル: 2段階調整 (オン/オフ)



- 指向性マイクロホン(耳かけ型のみ)
- オートマチックホン
- オートコイル※1



ティンパネット(CIC)

片耳価格 140,000円

- 使用電池: PR536(10A)



イントラ(ITC)

片耳価格 140,000円

- 使用電池: PR41(312)
- ボリューム搭載



カスタマイヤ(ITE)

片耳価格 140,000円

- 使用電池: PR48(13)
- ボリューム搭載



RIC312 (50ゲイン)

片耳価格 120,000円

- 使用電池: PR41(312)



BTE13スタンダード

片耳価格 120,000円

- 使用電池: PR48(13)
- タッチパネル
- FM対応 (オプション)



BTE13パワー

片耳価格 120,000円

- 使用電池: PR48(13)
- タッチパネル
- FM対応 (オプション)



BTE312

片耳価格 120,000円

- 使用電池: PR41(312)
- タッチパネル

カスタマイズ(耳あな型のみ)

- 標準はデジタルボリュームとなります。(カスタマイヤ、イントラ)
- アナログボリューム、プッシュボタン、ボリューム無しのいずれかに変更できます。
- 電池サイズは、イントラはPR536へ、カスタマイヤはPR41へそれぞれ変更することができます。

1年間保証

補聴器本体: お買い上げ日より1年間の自然故障は無償修理、その後4年間の修理に関しましては、一律の修理料金にて保証いたします。
レシーバー(RIC): お買い上げ日より2年間の自然故障は無償修理いたします。
※その他の保証は17ページをご覧ください。

医療機器認証番号

Xシリーズ耳あな型: 223ADBZX00107000
Xシリーズ耳かけ型: 223ADBZX00106000

Option 耳あな型補聴器オプション

お客様それぞれのきこえに合わせて、最適な状態でお使いいただくために、豊富なオプションをご用意しております。

※お求めの際は、販売店とよくご相談の上、お好みやご要望に適用したものをとお選びください。

アレルギー対策

- クリアルーサイト(透明シェル) ¥8,000
- UVシェル(透明・赤・青) ¥8,000
- FPCコート ¥6,000

ハウリング・補聴器の抜け防止

- ソフトシール ¥6,000

その他

- メモリスイッチ ¥8,000
- ※デジタル/アナログボリュームと併用(追加)の場合
- プッシュボタン(ティンパネットのみ) ¥8,000
- ※ボリューム調整またはメモリー切換えに使用します。
- オートコイル ¥4,000
- オンオフスイッチ ¥8,000
- ※本カタログに記載されている補聴器およびオプションには消費税はかかりません。

スターキー補聴器保証制度

※当初保証期間は器種によって異なります。詳細は各器種のページをご参照ください。

オーダーメイド補聴器お買い上げ時の保証(当初保証)

無償修理保証

補聴器納入後当初保証期間内で発生する自然故障に対する修理を無償で行います。なお、過失による損傷は有償となります。

1年間の無償再作

補聴器納入後1年以内であれば、形状がユーザーに不適な場合、無償で再作いたします。

紛失・盗難時の代替保証

補聴器納入後1年以内であれば、紛失・盗難にあった場合、1回のみ無償再作いたします。その際は公的証明の添付が必要となります。

耳かけ型補聴器お買い上げ時の保証(当初保証)

無償修理保証

補聴器納入後当初保証期間内で発生する自然故障に対する修理を無償で行います。なお、過失による損傷は有償となります。紛失・盗難時の代替保証は行っておりません。

有償修理保証規定

(オーダーメイド補聴器、耳かけ型補聴器共通)「得々保証」

当初保証期間終了後の有償修理料金は一律で設定され、購入年数により異なります。

一律修理価格

- ~3年目 ¥14,000
- ~4年目 ¥20,000
- ~5年目 ¥30,000

上記価格を上限とし、これを超える修理費用は請求いたしません。

※6年目からは部品有償修理(部品代+技術基本料)になります。

製品性能一覧 CIC:ティンパネット、ITC:イントラ、ITE:カスタムイヤ

器種	スタイル	JIS					ANSI (2cm ³)			適応聴力	使用電池	電池寿命 (時間)	掲載 ページ
		90dB最大出力 音圧レベル (dB SPL)		最大音響利得 (dB)		誘導コイル 入力 の 最大感度 (dB SPL)	90dB 最大出力 音圧レベル (dB SPL)	最大音響 利得 (dB)					
		ピーク(以下)	1600Hz	ピーク	1600Hz	1600Hz	ピーク	ピーク					
耳あな型	X110、 X90、X70 イグナイト30 イグナイト20	ビーンズ ※1	123-124	115-116	43-48	40-45	-	110-111	35-40	軽～中	PR536(10A)	65	8～12
	CIC	123-124	115-116	43-48	40-45	-	110-111	35-40	軽～中	PR536(10A)	65		
	ITC	124-128	116-120	48-58	45-55	-	111-115	40-50	軽～高	PR41(312)	120-125	8～16	
	ITE	128-136	120-128	53-68	50-65	77-108 ※3	115-123	45-60	軽～高	PR48(13)	195-210		
	アブソリュート パワー ※2	136-143	128-135	68-78	65-75	-	123-130	60-70	高～重	PR41(312)	85-110	8～14	
		143	135	78	75	109 ※3	130	70	高～重	PR48(13)	150		
	スケルトン ※2	123-124	115-116	43-48	40-45	-	110-111	35-40	軽～中	PR536(10A)	65	9～15	
124		116	48	45	-	111	40	軽～中	PR41(312)	125			
耳かけ型	X110、 X90、X70 イグナイト30 イグナイト20	ジーン	130	116	61	51	81	115	50	軽～高	PR536(10A)	65	7
	RIC312 50ゲイン	130	116	61	51	81	115	50	軽～高	PR41(312)	100	9～16	
	RIC312 アブソリュートパワー ※2	141	135	79	75	105	130	70	高～重	PR41(312)	85	9～15	
	RIC13 50ゲイン	130	116	61	51	81	115	50	軽～高	PR48(13)	175	6	
	RIC13 アブソリュートパワー ※2	141	135	79	75	105	130	70	高～重	PR48(13)	150		
	BTE312	135	128	65	63	93	126	60	軽～高	PR41(312)	95	9～16	
	BTE13 スタンダード	139	130	70	66	97	128	65	軽～高	PR48(13)	160		
	BTE13/パワー	142	131	77	74	102	133	70	中～重	PR48(13)	150		
	BTE13 パワープラス	146	136	84	77	102	138	80	高～重	PR48(13)	140		5

※1:X110、X90、X70のみ

※2:X110、X90、X70、イグナイト30のみ

※3:オプション

●補聴器のデータはJIS C 5512(2000)、ANSI S 3.22(2003)に基づいて測定されています。

●実際の電池寿命は使用状態によって変化します。

●改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

Accessories Xシリーズ アクセサリ

補聴器に取り付けて使用するアクセサリは弊社純正品をご使用ください。
純正品以外をご使用になると、脱落などの原因となる恐れがあります。

消耗品・管理用品



乾燥ケース(乾燥剤付属) ¥840(税込)

補聴器内の湿気を取り除きます。ケースの蓋には磁石のシートを設けており、補聴器から取り出した電池を紛失ないように貼り付けておくことができます。

乾燥剤(詰め替え用/1袋) ¥210(税込)



補聴器用空気電池(水銀 O 使用) PR536、PR41、PR48、PR44

世界的に定評のあるレオバック社の空気電池を採用。水銀を一切使用せず、環境にも配慮しています。



電池チェッカー(液晶) ¥840(税込)

電池残量を液晶で確認できます。予備電池ホルダー付き。



清掃ブラシ ¥210(税込)



ハードケース ¥1,575(税込)

軽量かつコンパクトなケースです。内部には仕切りを設けており、収納性にも優れます。カラーバリエーション(4色): オレンジ、青、黒、ピンク



ソフトケース ¥840(税込)

柔らかい素材のケースです。黒のみ。

耳あな型・耳かけ型補聴器兼用



ホワイトワックスガード ¥1,050(8本入・税込)

レシーバの開口部に装着し、耳垢の侵入を防ぎます。



オートコイルツール(磁石) ¥525(税込)

オートコイルまたはオートマチックホンの切替わりが弱い場合には、磁石を受話器に取り付けることで改善されます。


耳かけ型補聴器用



BTE用イヤフック ¥315(税込) ①大人用 ②子供用




チューブ付き ジョイント ¥210(税込)

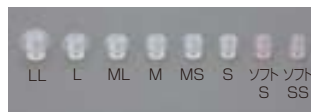

耳栓 ¥315(税込)

サイズ(8種類):
LL、L、ML、M、MS、S、ソフトS、ソフトSS

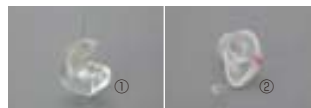

イヤモールド

お客様の耳の形に合わせて製作する特注の耳栓です。

- ①一般耳かけ型補聴器用
ハード ¥7,350(税込)
ソフト(スターフックス) ¥7,875(税込)
ソフト(7°シール) ¥8,925(税込)
- ②RIC50ゲイン用
ハードのみ ¥10,500(税込)



オーディオシュー(各色) オープン価格

オーディオシューを介して補聴器とFM受信機を接続することでFMシステムに対応できます。

- ①BTE13スタンダード用
- ②BTE13/パワー/パワープラス用
- ③RIC13用

※FMシステムについてはFM受信機の製造元にお問い合わせください。



RICタイプレシーバ ¥10,500(税込)

- ①50ゲイン用(左)
- ②50ゲイン用(右)
- サイズ(5種類): 1、2、3、4、5
- ¥21,000(税込)
- ③アブソリュートパワー用
左右サイズ(5種類): 1、2、3、4、5
- ※イヤモールド製作の為、耳型採取が必要です。



BTE用スマートイヤチューブ ¥1,575(5本入・税込)

サイズ(8種類):
1、2、3、4、5、3+、4+、5+



オープン用スマートイヤチップ ¥1,050(5個入・税込)

RICタイプレシーバまたは、BTE用スマートイヤチューブに接続して使用します。
サイズ(3種類): 10mm、8mm、5mm



スマートイヤチップ ¥1,050(5個入・税込)

RICタイプレシーバまたは、BTE用スマートイヤチューブに接続して使用します。
サイズ(3種類): 10mm、8mm、5mm